

Silk'n™

Beautiful Technology

SatinGlow



H3301

INSTRUCTIONS
FOR USE
BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCCIONES DE USO
MANUALE OPERATIVO



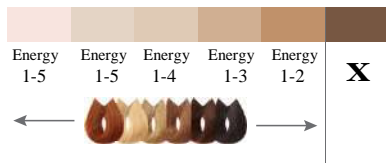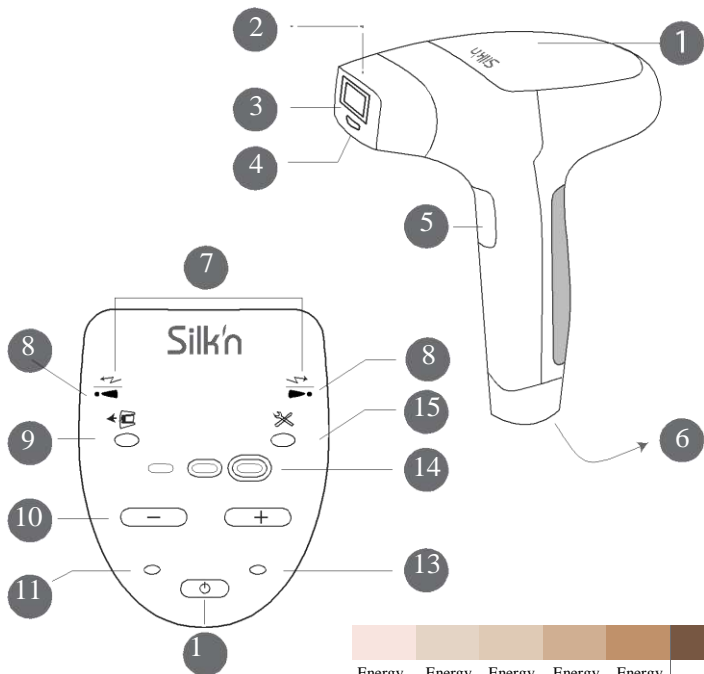

Copyright 2017 © Home Skinovations Ltd.

Toate drepturile rezervate.

EN

Notificare legală

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile pentru îmbunătățirea performanței, fiabilității sau a capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate precise și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu-și asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licență nu este acordată implicit sau în alt mod în temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. are depuse cereri de brevetare și în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizație la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam
2069206, ISRAEL www.silkn.eu or www.silkn.com, info@silkn.com.

Conținut

1. Înainte de a începe
2. Scopul utilizării
3. Utilizarea în siguranță a Silk'n SatinGlow
4. Contraindicații
5. Nu folosiți Silk'n SatinGlow dacă:
6. Evitați să utilizați Silk'n SatinGlow dacă:
7. Efecte secundare posibile
8. Epilarea pe termen lung a părului prin metoda Silk'n
9. Introducere
10. Întreținere
11. Depanare
12. Serviciu clienți
13. Garanție
14. Eliminare
15. Specificații
16. Semne și simboluri

Înainte de a utiliza Silk'n SatinGlow pentru prima dată, vă rugăm să citiți complet acest manual. Acordați o atenție suplimentară secțiunilor despre procedura de utilizare, operarea dispozitivului și cele după utilizare. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de fiecare tratament. Este un aparat puternic și trebuie să acordați o atenție specială siguranței la utilizare. Citiți toate avertismentele, contraindicațiile și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și respectați-le îndeaproape.

1. **Înainte de a începe**

Silk'n SatinGlow este un aparat pe bază de lumină pentru reducerea permanentă a părului, conceput pentru utilizarea la domiciliu.

1.1 Descrierea dispozitivului

Silk'n SatinGlow este alcătuit dintr-o unitate de îndepărtare a părului cu un panou de control și un cartuș cu lampă înlocuibil. Pe mânerul dispozitivului de îndepărtare a părului Silk'n SatinGlow găsiți butonul de declanșare a impulsurilor. Lampa înlocuibilă este amplasată la vârful dispozitivului de îndepărtare a părului.

1.2 Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- U Dispozitivul de epilat Silk'n SatinGlow
- U Adaptor
- U Manual de utilizare

Consultați schema de la începutul manualului pentru a identifica locația fiecărei caracteristici:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Panou de control | 8 Indicator LED: nuanța pielii |
| 2 Lampă înlocuibilă | 9 Indicator LED: Înlocuire lampă |
| 3 Unitate de epilare | 10 Buton de indicare a nivelului de energie |
| 4 Senzor de detectare a culorii | 11 Indicator LED: Pornit/ON |
| 5 Buton declanșare impulsuri | 12 Buton Pornit/Oprit |
| 6 Cablu cu adaptor | 13 Indicator LED: Oprit/Stand by |
| 7 Indicator LED: Pregătit utilizare | 14 Leduri care indică nivelul de energie |
| | 15 Indicator LED de avertizare |

1.3 Lampă înlocuibilă

Lampa Silk'n Satin Glow poate declanșa un număr limitat și presetat de impulsuri luminoase (indiferent de nivelul de energie al acestor impulsuri).

O serie completă de tratamente aplicate pe tot corpul necesită de obicei între 7000 și 10000 de impulsuri luminoase.

Modelul lămpii integrate în dispozitivul dumneavoastră și numărul de impulsuri sunt menționate pe ambalajul Silk'n Satin Glow.

2. Scopul utilizării

Silk'n Satin Glow este destinat pentru a îndepărta părul nedorit. Silk'n SatinGlow este, de asemenea, destinat să efectueze o reducere pe termen lung sau permanentă a părului. Reducerea permanentă a părului este definită ca fiind o reducere stabilă pe termen lung a numărului de fire de păr care cresc după o sesiune de tratament.

Silk'n SatinGlow poate fi folosit pentru a elimina părul nedorit de pe corp.

Zonele ideale ale corpului pe care puteți utiliza Silk'n SatinGlow includ axilele, linia bikinilor, brațele, picioarele, spatele și pieptul.

3. Utilizarea în siguranță a Silk'n SatinGlow

Cu Silk'n SatinGlow siguranța este pe primul loc.

Tehnologia Home Pulsed Light™ (HPL) din Silk'n SatinGlow asigură siguranță de înalt nivel cu niveluri de energie joase. HPL contribuie la obținerea de rezultate pe termen lung în ceea ce privește epilarea părului cu doar a fracțiune din energia utilizată de alte echipamente de epilare bazate pe lumină. Nivelul redus de energie reduce riscul de vătămare sau complicații și contribuie la siguranța dvs. în ansamblu.

Silk'n SatinGlow îți protejează pielea

Îndepărtarea părului pe bază de lumină nu este potrivită pentru tonurile de piele mai închisă sau pentru pielea bronzată. Silk'n SatinGlow vine cu un senzor de detectare a culorii pielii încorporat, care este proiectat pentru a măsura complexitatea suprafeței pe care este aplicat și pentru a permite aplicarea numai pe pielea adecvată. Această caracteristică unică de siguranță nu vă va permite aplicarea tratamentului în cazul în care pielea dvs. este prea întunecată sau prea bronzată. Mai mult, suprafața de tratare prin care sunt livrate impulsuri de lumină este integrată în interiorul cartușului lămpii. Acest lucru permite ca Silk'n SatinGlow să vă protejeze pielea prin evitarea contactului direct între suprafața de tratament și piele.

Silk'n SatinGlow vă protejează ochii


Silk'n SatinGlow are o funcție de siguranță integrată pentru protecția ochilor. Acesta a fost proiectat astfel încât un impuls de lumină nu poate fi emis atunci când suprafața de tratare se află poziționată în aer. Butonul de siguranță permite tratamentul numai atunci când suprafața de tratament este în contact cu țesutul.

4. Contraindicații

Silk'n SatinGlow nu este conceput pentru toate tipurile de utilizatori.

Vă rugăm să citiți și să țineți cont de informațiile prezentate în secțiunea următoare înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare și sfaturi personalizate vă recomandăm să vizitați www.silkn.eu sau www.silkn.ro

Dacă nu sunteți sigur că Silk'n SatinGlow este sigur pentru dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul personal sau medicul dermatolog.

Avertisment	Rezultate posibile	Sfat de siguranță
<p>Nu folosiți Silk'n SatinGlow pe pielea natural închisă la culoare. Nu este sigur!</p> <p>Vezi pe ambalaj tabelul cu culoarea parului și a pielii</p> 	<p>Tratarea pielii bronzate cu Silk'n SatinGlow poate avea ca rezultat efecte adverse cum ar fi înroșirea sau disconfortul pielii</p>	<p>Un SENZOR unic de CULOARE A PIELII este încorporat în Silk'n SatinGlow pentru a determina culoarea pielii tratate la începutul fiecărei sesiuni și în tipul sesiunii. SENZORUL DE CULOARE A PIELII asigură ca impulsurile vor fi emise doar pe nuanțe adecvate ale pielii.</p>

Avertisment	Rezultate posibile	Sfat de siguranță
<p>Nu folosiți pe tatuaje sau pe pielea în jurul ochilor permanent, bronzat sau negre după expunerea la soare, serotonina și alte substanțe, în special în zonele de expunere la soare (de exemplu, gâtul sau buze artificiale).</p> <p>Nu expuneți la soare zonele în care sunt aplicate pe eczemele active, psoriazis, leziuni, cicatrici deschise sau infecții (inflamații reci), în cazul unor stări anormale ale pielii cauzate de boli sistemice sau metabolice (cum ar fi, de exemplu diabetul)</p>	<p>Tratarea cu Silk'n în zona în jurul ochilor înainte de utilizarea dispozitivului poate provoca iritații și alte reacții adverse pe pielea în jurul ochilor. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p> <p>Acest lucru este valabil pentru toate tipurile și toate nuanțele de piele, inclusiv acelea care nu sunt tratate pe baza de lumină, dar cauza de iritație este cantitatea mare de radiații adverse pe pielea în jurul ochilor care poate provoca leziuni la un risc mai mare atunci când se folosește orice metoda de îndepărtare a parului nedorit cu ajutorul luminii.</p>	<p>Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului înainte și după utilizarea dispozitivului. Soarele poate provoca iritații și alte reacții adverse pe pielea în jurul ochilor. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p> <p>Pentru a vă proteja pielea în timpul și după utilizarea dispozitivului, utilizați o cremă de protecție solară SPF 30 sau mai mare timp de 2 săptămâni după fiecare sesiune de îndepărtare a parului nedorit.</p>
<p>Evitați utilizarea în jurul ochilor și în zona din jur.</p>	<p>Tratarea cu Silk'n în zona din jurul ochilor poate provoca iritații și alte reacții adverse pe pielea în jurul ochilor. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p> <p>Possibilele radiații optice periculoase pot fi emise de acest aparat. Nu priviți direct din timpul și după utilizarea dispozitivului. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p>	<p>Evitați utilizarea în jurul ochilor și în zona din jurul ochilor. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p> <p>Evitați utilizarea în jurul ochilor și în zona din jurul ochilor. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p>
<p>Nu tratați cu Silk'n SateinGlow dacă sunteți însărcinată sau alăptați.</p>	<p>Modificările hormonale pot provoca iritații și alte reacții adverse pe pielea în jurul ochilor. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p>	<p>Evitați utilizarea în jurul ochilor și în zona din jurul ochilor. Evitați expunerea la soare în timpul și după utilizarea dispozitivului.</p>
<p>Nu tratați zone pe care este posibil să doriți ulterior să vă crească parul.</p>	<p>Rezultatele sunt permanente.</p>	<p>SUPRAFAȚA DE TRATARE este în contact cu țesutul.</p>

Avertisment	Rezultate posibile	Sfat de siguranță
<p>Feriți Silk'n SatinGlow de apa! Nu așezați și nu depozitați Silk'n SatinGlow în locuri în care ar putea cădea, ar putea fi împins sau așezat într-o cada, chiuveta sau în alt recipient cu apa.</p>	<p>Acest lucru poate cauza electrocutarea gravă.</p>	<p>Nu folosiți Silk'n SatinGlow în timp ce faceți baie sau dacă se udă sau se umezește. Dacă dispozitivul a căzut în apă, scoateți-l imediat din priză.</p>
<p>Nu încercați să deschideți sau să reparați dispozitivul Silk'n SatinGlow.</p>	<p>Deschiderea Silk'n SatinGlow va poate expune la componente electrice periculoase sau la energie de lumina pulsata, oricare dintre acestea putând cauza ranirea grava și/sau afectarea permanenta a ochilor. De asemenea, dispozitivul se poate deteriora și veți pierde garanția.</p>	<p>Daca aveți un dispozitiv stricat sau deteriorat care trepreparat, consultați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.</p>

5. Nu utilizați Silk'n SatinGlow dacă:

Lampa dispozitivului este defectă sau suprafața de tratament este crăpată, fisurată sau lipsește.		Opriți imediat și contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.
Accesoriile sau anexele nu sunt recomandate de Home Skinovations Ltd.		
Dispozitivul are o fișă sau un cablu deteriorate.	Feriți cordonul de alimentare de suprafețele încălzite.	
Observați fum sau vă miroase a fum în timpul utilizării.		
Nu funcționează corect sau pare deteriorat.		
SENZORUL DE CULOARE A PIELII este crăpat sau rupt.		
Carcasa exterioră este crăpată sau desprinsă.		

6. Evitați utilizarea Silk'n SatinGlow dacă una din următoarele afirmații este valabilă:

Existența anterioară a unei cicatrici cheloidale.	Înainte de a utiliza Silk'n SatinGlow, consultați medicul.
Dacă suferiți de epilepsie.	
Dacă aveți o boală legată de fotosensibilitate, cum ar fi porfiria, erupția polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.	
Dacă ați avut cancer de piele sau zone de piele cu potențial malign	
Dacă ați făcut radioterapie sau chimioterapie în ultimele 3 luni.	
Dacă ați avut altă stare care, după părerea medicului dvs., face nesigură tratarea dvs.	
Dacă pielea dvs. a fost tratată cu un medicament prescris de medic în ultimele 6 luni.	

7. Posibile efecte secundare

Când dispozitivul se folosește conform instrucțiunilor, efectele secundare și complicațiile asociate utilizării Silk'n SatinGlow sunt ceva neobișnuit. Cu toate acestea, fiecare procedură cosmetică, inclusiv cele destinate utilizării domestice, implică un anumit grad de risc. Prin urmare, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care pot apărea la folosirea sistemelor de îndepărtare a părului nedorit cu lumină pulsată, destinate utilizării domestice.

Reacție adversă	
Disconfort minor al pielii – Deși îndepărtarea la domiciliu cu lumină pulsată a părului nedorit este în general foarte bine tolerată, cei mai mulți utilizatori simt un oarecare disconfort ușor în timpul utilizării, descris în general ca fiind o senzație redusă de usturime pe zonele de piele tratate. Senzația de usturime durează de obicei pe durata aplicării sau câteva minute după aceea. Orice depășește acest disconfort minor este anormal și înseamnă că fie nu mai trebuie să continuați folosirea Silk'n SatinGlow, deoarece nu puteți tolera aplicația de îndepărtare a părului nedorit, fie setarea nivelului de energie este prea mare.	
Înroșirea pielii – După ce ați folosit Silk'n SatinGlow sau la 24 de ore de la utilizarea Silk'n SatinGlow, pielea dvs. se poate înroși. Roșeața dispăre de obicei după 24 de ore. Dacă roșeața nu dispăre în 2 - 3 zile, consultați medicul.	
Sensibilitate sporită a pielii – Pielea din zona tratată este mai sensibilă, prin urmare puteți experimenta uscarea sau exfolierea pielii.	
Reacție adversă	EN
Modificările de pigment – Silk'n SatinGlow vizează firul de păr, în particular celulele pigmentate din foliculul de păr și foliculul de păr însuși. Cu toate acestea, există riscul de hiperpigmentare temporară (pigment crescut sau decolorare maro) sau hipopigmentare (albire) la pielea din jur. Riscul de modificare a pigmentării pielii este mai mare pentru persoanele cu nuanțe mai închise ale pielii. În general, decolorarea sau modificările de pigment al pielii sunt temporare și hiperpigmentarea sau hipopigmentarea permanentă apar rareori.	
Înroșirea excesivă și umflarea – În rare cazuri, pielea tratată se poate înroși foarte tare și se umflă. Acest lucru se întâmplă mai des în zone sensibile ale corpului. Roșeața și umflarea ar trebui să cedeze în 2 - 7 zile și trebuie tratate cu aplicări frecvente de gheață. Curățarea delicată este OK, dar trebuie evitată expunerea la lumina soarelui.	

M

Epilarea parului cu ajutorul laserului sau al luminii intens pulsate poate determina creșterea accentuată a parului la unele persoane. Pe baza datelor disponibile, grupurile cu cel mai ridicat risc de răspuns sunt femeile cu descendențe din zona mediteraneană, Orientul Mijlociu și Asia de Sud când folosesc aparatul pentru față și gât. Pentru informații suplimentare, vizitați www.silkn.eu sau domeniul local Silk'n.

8. Îndepărtarea pe termen lung a părului nedorit cu Silk'n

Un ciclu complet de creștere a părului poate dura 18-24 luni. În acest timp, pot fi necesare mai multe sesiuni de tratare cu Silk'n SatinGlow pentru a se obține o îndepărtare permanentă a părului nedorit.

Eficiența îndepărtării părului nedorit variază de la o persoană la alta în funcție de zona corpului, culoarea părului și modul în care se utilizează Silk'n SatinGlow.

Planul obișnuit Silk'n SatinGlow de îndepărtare a părului nedorit în timpul unui ciclu complet de creștere a părului:

Tratamente 1-4 – plan de două săptămâni diferite

Tratamente 5-7 – plan de patru săptămâni diferite

Tratamente 8 + – tratament după cum este necesar până la obținerea rezultatelor dorite.

Rezultatul așteptat al tratamentului de îndepărtare a părului nedorit

Tip de piele Fitzpatrick	Culoarea părului	Fluență redusă [J/cm ²]	Zona corpului ²	Numărul mediu de tratamente ¹	Eficiența (% îndepărtare/o nouă creștere a părului) ²
I - IV	Maro deschis până la maro	2.5 - 4	Gambe sau pulpe	Sesiune 10-12, aprox. patru săptămâni separate.	60%
			Brațe		50%
			Zona inghinală		60%
			Axile		55%

I - IV	Maro - negru	2.5 - 4	Gambe sau pulpe	Sesiune 8-10, aprox. patru săptămâni separate.	70%
			Brațe		60%
			Zona inghinală		70%
			Axile		65%

1. Răspunsul individual depinde de tipul de păr, precum și de factorii biologici care pot afecta modelele de creștere a părului. Unii utilizatori pot răspunde mai repede sau mai lent decât numărul mediu la tratamente.

2. Unele persoane se pot aștepta la o îndepărtare permanentă a părului într-o singură sesiune sau chiar într-una dublă. Durata perioadei de repaus a foliculelor de păr depinde și de zona corpului.

9. Începeți!

1. Scoateți dispozitivul de îndepărtare a părului Silk'n SatinGlow și alte componente din cutie.
2. Verificați dacă cartușul cu lampă de unică folosință este introdus corect la vârful dispozitivului și că acesta nu este deteriorat.
3. Conectați cablul adaptorului în mufa dispozitivului Silk'n SatinGlow.
4. Conectați adaptorul la o priză electrică. Indicatorul LED de pornire se aprinde. Silk'n SatinGlow este acum pregătit de utilizare.

E Efectuează tratamente utilizând Silk'n SatinGlow în condiții de siguranță și în mod corespunzător!

J Alegeți zonele de tratare care nu au avut expunere recentă la soare.

5. Pielea din zonele de tratament trebuie să fie rasă, curată, uscată și fără urme de pudră, antiperspirante sau deodorante. Nu utilizați ceară, nu smulgeți și nu pensați părul. Raderea este un pas important pentru obținerea rezultatelor dorite!

6. Apăsăți butonul On / Standby. Indicatorul luminos de pornire (portocaliu) se va aprinde și se va declanșa un sunet al ventilatorului (similar sunetului unui uscător de păr).

7. La aproximativ 3,5 secunde după apăsarea butonului On / Stdby, indicatorul LED Pregătit utilizare (verde) se va aprinde. Dispozitivul este apoi gata pentru a declanșa primul impuls la cel mai scăzut nivel de energie.

8. Dacă acesta este primul dvs. tratament - Alegeți nivelul de energie. Silk'n SatinGlow oferă 5 niveluri de energie de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai înalt). Pentru a alege nivelul corect de energie pentru primul tratament, testați fiecare zonă de tratament separat.

»Plasați suprafața de tratament pe piele și apăsați butonul de emitere a impulsurilor pentru a transmite un impuls. Dacă nu ați sesizat un disconfort anormal, apăsați încă o dată butonul de setare a nivelului de energie + și eliberați un impuls pe un loc diferit la nivelul de energie 2.

»Continuați testarea la niveluri mai ridicate de energie până când ajungeți la cel mai înalt nivel cu care vă simțiți confortabil. Dacă într-o oră nu veți avea efecte adverse, puteți începe tratamentul complet la acel nivel de energie.

»Repeți acest test pentru fiecare parte a corpului pe care intenționați să o tratați.

9. Setăți nivelul de energie. Dacă nivelul de energie ar trebui să fie mai mare decât cel afișat, apăsați butoanele de setare a nivelului de energie utilizând "-" sau "+" pentru a reduce sau a mări

nivelul de energie până când nivelul de energie dorit este setat și reprezentat de 3 indicatoare luminoase (vezi secțiunea "9.1 Niveluri de energie").

10. Aplicați suprafața de tratament pe piele, asigurându-vă că pielea este uniformă și întinsă. Imediat după ce suprafața de tratament este în contact total cu pielea, indicatorul LED Pregătire utilizare va începe să clipească.

11. Apăsați butonul de impuls. Aparatul va determina mai întâi culoarea pielii. În cazul în care culoarea pielii este suficient de deschisă pentru o aplicare sigură, dispozitivul va emite un impuls de lumină pe piele și indicatorul LED Pregătire utilizare se va stinge.

»Veți vedea un flash strălucitor de lumină și veți auzi simultan un sunet subtil, care este un zgomot normal pentru dispozitiv. Veți simți o senzație ușoară de căldură și gădilături. Silk'n SatinGlow se va reîncărca imediat pentru următorul impuls.

»După 3,5 secunde indicatorul LED Pregătire utilizare va porni din nou.

12. Îndepărtați suprafața de tratament din zona tratată a pielii.

13. Deplasați suprafața tratamentelor într-o altă zonă a pielii. Utilizați urmele de presiune marcate de dispozitiv pe piele pentru a vă ghida pentru poziționarea corectă a următorului impuls, evitând atât golurile, cât și suprapunerile între impulsuri.

Impulsurile emise de Silk'n SatinGlow trebuie administrate rând cu rând, începând de la un capăt al fiecărui rând și progresând secvențial spre celălalt capăt. Această tehnică vă permite să controlați mai bine acoperirea tuturor zonelor pielii și vă ajută să evitați tratarea aceleiași zone mai mult decât o singură dată sau omiterea anumitor zone.

E Încercați să evitați impulsurile suprapuse.

E Nu tratați aceeași suprafață a pielii mai mult decât o dată pentru o sesiune de îndepărtare a părului.

14. Repetați procesul până când întreaga suprafață de tratament este acoperită.

E În cazul în care pe pielea dumneavoastră observați blistere sau arsuri, opriți utilizarea imediat!

9.1 Niveluri de energie

Nivelul de energie determina intensitatea impulsurilor de lumina emise spre piele. Cu cât nivelul de energie este mai crescut, cu atât tratamentul este mai eficient, dar crește și riscul apariției efectelor secundare și a complicațiilor.

Aparatul dispune de 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai ridicat), reprezentate de 5 led-uri indicatoare ale nivelului de energie.

U Nivelul 1 (cel mai mic): Indicatorul LED din stânga este aprins continuu.

U Nivelul 2: Indicatorul LED din stânga este aprins în mod constant și indicatorul luminos central clipește.

U Nivelul 3: Atât luminile din stânga cât și cele centrale luminează continuu. RO

U Nivelul 4: Luminile stânga și centrală sunt aprinse constant, iar indicatorul din dreapta clipește.

U Nivelul 5 (cel mai ridicat): Toate cele 3 Indicatoare LED sunt aprinse constant.

Ori de câte ori Silk'n SatinGlow este pornit, nivelul său de energie va fi resetat automat la cel mai scăzut nivel de energie. Numai Indicatorul LED al nivelului de energie va fi aprins.

Pentru a seta nivelul de energie, apăsați butoanele de setare a nivelului de energie utilizând "-" sau "+" pentru a reduce sau a crește nivelul de energie respectiv.


9.2 Senzorul care determină nuanța pielii

Îndepărtarea părului cu lumină intens pulsată de pe tonurile de piele mai întunecate poate avea efecte adverse cum ar fi arsuri, blistere și modificări ale culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare).

Pentru a preveni o astfel de utilizare incorectă, un senzor unic pentru culoarea pielii integrat în Silk'n SatinGlow măsoară complexitatea nuanței pielii tratate la începutul fiecărei sesiuni și ocazional în timpul sesiunii. Dacă senzorul de detectare a culorii pielii detectează un ton de piele prea închis pentru aplicația Silk'n SatinGlow, dispozitivul va opri automat emiterea de impulsuri.

Dacă nu vedeți nici un impuls de lumină și indicatorul LED de avertizare a tonului pielii clipește, aceasta indică faptul că tonul pielii, măsurat de senzorul de culoare a pielii, este prea întunecat pentru o aplicare sigură. Încercați să utilizați dispozitivul pe o altă parte a corpului sau contactați Serviciul Clienți.

9.3 Pulsing (pulsare) și Gliding (alunecare)

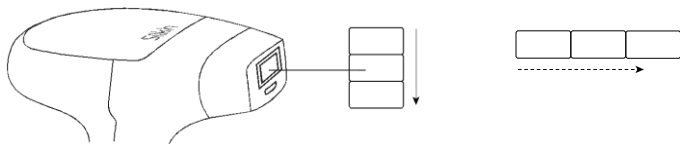

Pulsare este cea mai buna tehnica pentru lucrul cu niveluri ridicate de energie.

Apasați suprafața de tratament pe piele. Lucrați pe rânduri (orizontal sau în jos ca în imagine). Începeți la un capat al fiecarui rând și avansați la celalalt capat.

Suprafața de tratament creeaza semne temporare de presiune pe zona tratata pentru ca dvs. sa puteti vedea zonele tratate.

Dupa fiecare impuls, mutați suprafața de tratament pe zona urmatoare. Continuați acțiunea de pulsare pentru zona pe care o tratați.

La folosirea aparatului, evitați omiterea sau suprapunerea de zone de piele.

Alunecarea este cea mai buna tehnica pentru lucrul cu niveluri reduse de energie.

Apasați suprafața de tratament puternic pe piele și glisați aparatul încet (orizontal sau în jos, ca în imagine). Asigurați-va ca suprafața de tratament atinge întotdeauna pielea.

La niveluri reduse de energie, aparatul are nevoie de doar 1-3,5 secunde pentru a se reîncarca între impulsuri. Acest lucru genereaza o succesiune neîntrerupta de flash-uri.

Glisați la o viteza care sa permita evitarea golurilor sau a

suprapunerilor.

Nu tratați aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe sesiunea de epilare.

În caz de orice disconfort, opriți imediat utilizarea aparatului.

9.4 La ce să vă așteptați când utilizați Silk'n SatinGlow

Pentru multe persoane, Silk'n SatinGlow poate fi prima experiență cu un aparat pe bază de impulsuri luminoase cu utilizare la domiciliu. Silk'n SatinGlow este ușor de utilizat și sesiunile de îndepărtare a părului sunt rapide..

Pe parcursul sesiunii de tratament este normal să simțiți sau să experimentați:

Zgomot: Ventilatorul de răcire face un zgomot similar cu al uscătorului. Acest lucru este normal.

Pocnet: Cu fiecare flash de lumină HPL™. Atunci când un impuls de lumină este activat, este normal să auziți un sunet subtil simultan cu emiterea flashului de lumină.

O presiune moderată a suprafeței de tratament: Acest lucru este necesar și util pentru plasarea impulsurilor adiacente de lumină și face parte din caracteristica unică de siguranță a Silk'n SatinGlow.

Senzație de căldură și gădilat: În timpul emiterii fiecărui impuls de lumină este normal să simțiți o senzație de căldură și gădilat care provine de la impulsul de lumină.

Roșeață: Se poate să observați o ușoară colorare a pielii în roz în timpul sau imediat după tratament. Acest lucru se poate observa mai bine în jurul firelor de păr. E Opriți imediat utilizarea dacă pielea este foarte roșie. În cazul oricăror complicații, adresați-vă medicului.

9.5 După utilizarea Silk'n SatinGlow

U Când ați terminat sesiunea de tratament, închideți Silk'n SatinGlow apăsând butonul On / Standby. Toate indicatoarele luminoase se vor stinge și indicatorul luminos Standby se va aprinde. Asigurați-vă că vă amintiți ultima setare a nivelului de energie pe care ați folosit-o, deoarece nu va fi restabilită când porniți din nou Silk'n SatinGlow.

U Deconectați cablul adaptorului de la priza electrică.

U După fiecare sesiune de epilare este recomandat să curățați dispozitivul Silk'n SatinGlow, în special suprafața de tratare (vezi secțiunea "10.1 Curățarea").

U După curățare, este recomandat să depozitați dispozitivul în cutia sa originală și să îl țineți departe de apă.

Îngrijirea pielii după o sesiune de epilare:

J Nu expuneți zonele de piele tratate la soare. Asigurați-vă că protejați cu atenție pielea tratată, folosind o cremă cu protecție solară, în timpul perioadei de eliminare a părului și timp de cel puțin 2 săptămâni de la ultima sesiune cu Silk'n SatinGlow.

10 . Întreținere

10.1 Curățare

După fiecare sesiune de tratament, este important să curățați aparatul Silk'n SatinGlow, în special suprafața de tratament..

U Scoateți din priză Silk'n SatinGlow înainte de curățare.

U Folosiți un material textil curat și uscat și o soluție specială de curățare a echipamentelor electronice pentru a curăța cu grijă suprafața, inclusiv suprafața de tratament.

E Nu scufundați niciodată Silk'n SatinGlow sau alte componente ale acestuia în apă.

10.2 Înlouirea lămpii

Lampa Silk'n Satin Glow poate declanșa un număr limitat și presetat de impulsuri luminoase. Viteza cu care sunt emise impulsurile este influențată numai de nivelul de energie setat al dispozitivului. Nu există o scădere a consumului de energie în timpul duratei de viață a cartușului.

U Când rămân doar 100 de impulsuri luminoase în cartușul lămpii de unică folosință, indicatorul luminos al cartușului de înlocuire de pe panoul de control va începe să clipească, indicând faptul că cartușul lămpii ar trebui în curând înlocuit.

U Când rămân doar 100 de impulsuri luminoase în cartușul lămpii de unică folosință, indicatorul luminos al cartușului de înlocuire de pe panoul de control va începe să clipească, indicând faptul că cartușul lămpii ar trebui în curând înlocuit.

U Deoarece numărul de impulsuri luminoase din cartușul lămpii de unică folosință scade, Indicatorul LED al lămpii înlocuibile va clipi mai repede.

U Odată ce toate impulsurile dintr-un cartuș de lampă de unică folosință au fost utilizate, indicatorul luminos al cartușului de înlocuire va rămâne aprins, indicând faptul că nu pot fi emise impulsuri suplimentare.

U Pentru a continua sesiunea de îndepărtare a părului, va fi necesar să înlocuiți lampa.

M O lampă ar trebui să fie înlocuită, de asemenea, dacă apar pete mari în interiorul acesteia sau dacă suprafața sa de tratament este crăpată. Pentru piesele de schimb, contactați Serviciul Clienți.

Pentru a înlocui un cartuș de lampă de unică folosință:

1. Apăsăți butonul On / Standby pentru a seta Silk'n SatinGlow în modul de așteptare.
2. Deconectați adaptorul de alimentare de la priza electrică.
3. Prindeți cartușul de unică folosință de pe ambele părți, scoateți-l din aparat și aruncați-l cu coșul de gunoi normal.
4. Desfaceți un nou cartuș de lampă de unică folosință.
5. Apăsăți ușor noul cartuș de lampă de unică folosință.

M După ce înlocuiți cartușul de unică folosință cu unul nou, setați întotdeauna energia la un nivel mai scăzut decât setarea normală. Ridicați nivelul energiei numai dacă nu sesizați un disconfort anormal în timpul sau după tratament.

11. Depanare

11.1 “Silk’n SatinGlow nu pornește.”

U Asigurați-vă că adaptorul este conectat adecvat la aparatul Silk’n SatinGlow.

U Asigurați-vă că adaptorul este conectat într-o priză electrică de perete.

11.2 “Aparatul nu emite nici un impuls atunci când apăș butonul de emitere al impulsurilor.”

Verificați dacă aparatul este conectat și ledul pregătit este aprins. Asigurați-vă că suprafața de tratament este apăsată uniform și puternic pe piele.

U Verificați Indicatorul LED pentru nuanța pielii. Dacă acesta clipește, acest lucru înseamnă că nuanța pielii măsurată este prea închisă pentru o aplicare sigură. Încercați să plasați aparatul pe o altă zonă sau contactați departamentul service.

U Verificați Indicatorul LED pentru înlocuirea lămpii. Dacă este pornit, deconectați Silk’n SatinGlow și înlocuiți lampa.

U Asigurați-vă că Indicatorul LED Pregătit de utilizare este pornit.

Dacă în decurs de 10 secunde Indicatorul LED Pregătit utilizare rămâne oprit, închideți și reporniți Silk’n SatinGlow apășând de două ori butonul On / Standby.

»Dacă problema persistă, contactați departamentul service.

U Verificați Indicatorul LED de avertizare.

»Dacă indicatorul luminos este aprins, închideți și reporniți Silk’n SatinGlow apășând pe On / Standby de două ori.

»Dacă problema persistă, contactați departamentul service.

E Nu încercați să deschideți sau să reparați dispozitivul. Numai centrele de reparații autorizate Silk’n au permisiunea de a efectua reparații.

Deschiderea dispozitivului Silk’n SatinGlow vă poate expune la componentele electrice periculoase și la energia luminoasă pulsată, oricare dintre acestea poate provoca vătămări corporale grave și / sau leziuni permanente la nivelul ochilor.

Încercarea de a deschide Silk’n SatinGlow poate, de asemenea, să deterioreze dispozitivul și vă va

anula garanția. Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți Silk'n dacă aveți un dispozitiv defect sau deteriorat care are nevoie de reparație.

12. Serviciul clienți

EN

Consultați site-ul nostru web pentru mai multe informații: www.silkn.eu. Manualul este disponibil și pentru descărcarea PDF de pe: www.silkn.eu. Contactați serviciul de asistență clienți pentru a raporta operațiunile sau evenimente neașteptate sau orice altă problemă a aparatului. Detaliile noastre de contact sunt:

Țară	Număr service	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franța	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Olanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Regatul Unit	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Alte țări	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

13. Garanție

Consultați certificatul de garanție Silk'n

14. Eliminare





N

Pentru protecția mediului. Eliminați ambalajul la un punct de reciclare care sortează materialele în funcție de tip. Dacă aparatul ajunge la sfârșitul duratei de viață, respectați legislația țării pentru eliminarea articolelor electrice.

15. Specificații

Mărimea suprafeței de acțiune	1.3cm x 3cm [3.9cm ²]	
Viteză	1 impuls la fiecare 3.5 second: 1.1 cm ² /sec	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Nivel maxim de energie	Max 4J/cm ²	
Lungimea de undă	475-1200nm	
Timp de încărcare/Sursa de putere	Operare continuă	
Cerințe electrice	100-240 VAC, 0.9A	
Operare și siguranță	Senzorul pentru detectarea nuanței pielii funcționează doar pe tipuri de piele	
Mărimea ambalajului	22cm x 22cm x 13.5cm	
Greutate sistem	0.35kg	
Temperatură	Operare	10 to 40°C
	Depozitare	-40 to +70°C
	Operare	30 to 75% rH
Umiditate relativă	Depozitare	10 to 90% rH
Presiune atmosferică	Operare	700 to 1060 hPa
	Depozitare	500 to 1060 hPa

16 . Semne și simboluri

	Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor CE.
	Clasa II. Adaptorul este protejat împotriva șocului electric prin izolație dublă.
IP30	Aparatul este protejat împotriva pătrunderii de obiecte cu un diametru mai mare de 2,5 mm, precum degetele, pentru protecția împotriva electrocutării.
	Nu folosiți în mediu umed.
	Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați în conformitate cu legislația țării dvs. și contribuiți la protecția mediului.